

Persona



Hormonfreie Verhütung



Gebrauchsanweisung

Willkommen bei Persona

Persona ist eine natürliche Verhütungsmethode die in Harmonie mit Ihrem Körper funktioniert. Persona hat keine arzneimitteltypischen Nebenwirkungen, basiert nicht auf Medikamenten und ist einfach anzuwenden. Das Prinzip von Persona beruht auf der Überwachung hormoneller Veränderungen in Ihrem Urin, um die Tage Ihres Zyklus zu identifizieren, an denen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schwanger werden können.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Persona die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Persona besteht aus einem Monitor mit Touchscreen-Bildschirm und Teststäbchen (mit diesen Teststäbchen beobachten Sie die Hormonveränderungen in Ihrem Urin). Teststäbchen und Batterien (2 AA 1,5 V Alkali-Batterien) sind separat erhältlich. Für den ersten Zyklus, in dem Sie Persona anwenden, benötigen Sie 16 Teststäbchen. Für alle weiteren Zyklen benötigen Sie jeweils 8 Teststäbchen.

INHALT

- Willkommen bei Persona 2
- Ist Persona für mich geeignet? 3
- Wie funktioniert Persona? 4
- Wie zuverlässig ist Persona? 4
- Anwendung von Persona 5
- Erste Schritte 6
- Kalender 14
- Tipps und Problemlösungen 16
- Reinigung des Einschubschlitzes für die Teststäbchen 18
- Neuprogrammierung Ihres Monitors 18
- Fragen und Antworten 19

Ist Persona für mich geeignet?

Bevor Sie Persona verwenden, müssen Sie sich sicher sein, dass dies die richtige Verhütungsmethode für Sie ist.

Sie dürfen Persona nicht verwenden, wenn:

- Ihre **Zyklen kürzer als 23 Tage oder länger als 35 Tage sind** (Sie können die Länge Ihres Zyklus berechnen, indem Sie die Anzahl der Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen);
- Sie **Wechseljahressymptome hatten**, wie zum Beispiel nächtliches Schwitzen oder Hitzewallungen;
- Sie **stillen**;
- Sie sich einer **Hormonbehandlung unterziehen**, wie zum Beispiel **hormonelle Verhütungsmittel, Fertilitätsbehandlungen oder eine Hormonersatztherapie**;
- Sie sich anderen **Behandlungen unterziehen, die sich auf Ihren Zyklus auswirken können**;
- Sie **Antibiotika einnehmen, die Tetracykline enthalten**. Sobald Sie Ihre Behandlung beendet haben, können Sie zu Beginn Ihres nächsten Zyklus mit der Anwendung von Persona beginnen;
- Ihre **Leber- oder Ihre Nierenfunktion beeinträchtigt ist**;
- Sie unter dem **polyzystischen Ovarialsyndrom leiden**;
- **Sie unter keinen Umständen schwanger werden dürfen oder wollen.**

Persona schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten oder HIV.

Sie müssen mit der Anwendung von Persona warten, wenn Sie kürzlich:

- **Gestillt haben**;
- **Eine hormonelle Verhütungsmethode verwendet oder eine Hormontherapie erhalten haben**;
- **Irgendeine andere Behandlung erhalten haben, die Ihren Zyklus beeinflusst haben könnte**;
- **Schwanger gewesen sind (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde).**

Nach einer Schwangerschaft, dem Abstillen oder dem Ende einer hormonellen Verhütung oder anderer Behandlungen, die Ihren Zyklus beeinflusst haben könnten, müssen Sie solange warten, bis Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende Zyklen gehabt haben. Die Dauer dieser beiden Zyklen muss mindestens 23 Tage und darf höchstens 35 Tage betragen. Mit Ihrem dritten Zyklus können Sie mit der Anwendung von Persona beginnen.

Bitte überprüfen Sie hier regelmäßig, ob Persona noch für Sie geeignet ist. Wenn Sie Persona nicht mehr anwenden möchten, dann finden Sie dazu unter Frage 20 mehr Informationen. Wenn Sie den Monitor zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden möchten, dann müssen Sie zuvor überprüfen, ob diese Verhütungsmethode noch für Sie geeignet ist.

Wie funktioniert Persona?

Ihr monatlicher Zyklus wird von Hormonen gesteuert. Für die Verhütung sind dabei insbesondere Östrogen und das luteinisierende Hormon von Bedeutung. Persona überwacht diese beiden Hormone mithilfe von einfachen Urintests und identifiziert so die Tage mit einem hohen Risiko für eine Schwangerschaft („Rote Tage“) und solche Tage, an denen Sie ohne weitere Verhütung Geschlechtsverkehr haben können („Grüne Tage“). Die Farbangabe bezieht sich dabei auf die Farben, die das Display von Persona anzeigt.

„Rote Tage“ sind die Tage rund um Ihren Eisprung (Ovulation = Freisetzung eines Eis aus dem Eierstock). Persona berechnet diese Tage mittels der Hormonbestimmungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer des unbefruchteten Eis und der Spermien.

Mehr Informationen zu „Roten Tagen“ und „Grünen Tagen“ finden Sie auf Seite 9.

Wie zuverlässig ist Persona?

Persona ist 94% zuverlässig, wenn es anleitungsgemäß und als einzige Verhütungsmethode angewendet wird. Das bedeutet, dass von 100 Frauen, die ein Jahr lang Persona anwenden, 6 schwanger werden können, auch wenn sie ausschließlich an „Grünen Tagen“ Geschlechtsverkehr hatten. D.h. an den Tagen, für die Persona kein Risiko für eine Schwangerschaft angezeigt hatte.

Die 94% Zuverlässigkeit von Persona beruht darauf, dass Sie an "Roten Tagen" auf Geschlechtsverkehr verzichten. Das Risiko einer Schwangerschaft ist erheblich höher, wenn Sie an einem "Roten Tag" Geschlechtsverkehr haben, selbst wenn Sie eine Barriere-Methode, wie Kondome, verwenden.

Anwendung von Persona

Bedeutung der Symbole

 Sie können die Sprache auswählen, die angezeigt werden soll.

 Mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) können Sie Ihren Monitor schützen.

 Sie können die Helligkeit der Anzeige anpassen.

 Sie können Ihren Monitor neu programmieren. Siehe Seite 18.

 Sie können sich Informationen über Ihren aktuellen Zyklus und die letzten 6 Zyklen anzeigen lassen.

 Sie können die Uhrzeit einstellen und verändern.

 Sie können den Touchscreen rekalisieren.



Wenn Ihre Periode beginnt, können Sie einen neuen Anwendungszyklus einrichten.



Für Testtage können Sie eine Erinnerungsfunktion einrichten.



Sie können die Geräteeinstellungen ändern (wie zum Beispiel die PIN, die Uhrzeit, die Sprache, die Helligkeit oder den Monitor neu programmieren oder den Touchscreen kalibrieren)



Das „O“-Symbol wird angezeigt, wenn das Risiko für eine Schwangerschaft am höchsten ist.



Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand der Batterie an.



Das Glockensymbol zeigt an, dass die Erinnerungsfunktion aktiviert ist.

Löschen

Dieser Vorgang löscht Ihre aktuelle Eingabe.



Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Bildschirmanzeige zurück.

OK

Dies bestätigt, Ihre Eingabe und/oder geht zum nächsten Bildschirm.

Erste Schritte

Zum Einsetzen der Batterien drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des Monitors und nehmen die Abdeckung des Batteriefachs ab. Legen Sie die Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Um den Monitor einzuschalten, müssen Sie den Deckel hochklappen und die An/Aus-Taste auf der Vorderseite des Monitors drücken.

Der Monitor hat einen Bildschirm, der sich bei Nichtbenutzung nach 30 Sekunden abdunkelt und nach einer Minute ausschaltet. Bedienen Sie den Bildschirm ausschließlich mit den Fingern - verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände.

Anweisungen auf dem Bildschirm unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihres Persona-Monitors. Hierzu gehört unter anderem die Kalibrierung des Bildschirms, die die Positionierung der Schaltflächen kontrolliert, wenn Sie diese berühren.



Testlicht

An/Aus-Taste

Touchscreen-Bildschirm



Einrichtung der PIN

Sie können Ihren Monitor mit einer PIN schützen. Geben Sie hierzu eine 4-stellige Zahl ein und bestätigen Sie diese. Sobald Sie eine PIN eingerichtet haben, müssen Sie diese jedes Mal beim Anschalten des Monitors eingeben. Wenn Sie Ihre PIN zweimal falsch eingeben, wird der Monitor gesperrt. Informationen, wie Sie Ihren Monitor wieder entsperren können, finden Sie auf Seite 20.



Einrichtung eines neuen Anwendungszyklus

Am ersten Tag Ihrer Periode sollten Sie einen neuen Anwendungszyklus einrichten. (Der erste Tag Ihrer Periode ist der erste Tag Ihrer Blutung. Schmierblutungen sollten Sie ignorieren.) Drücken Sie auf  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie vergessen, dies am 1. Tag zu tun, können Sie noch bis zum 4. Tag Ihres Zyklus einen neuen Anwendungszyklus einrichten. Wenn Sie innerhalb der ersten 4 Tage Ihres Zyklus keinen neuen Zyklus einstellen, dann lesen Sie sich bitte Frage 4 durch.

Geben Sie zuerst das Datum und anschließend die Uhrzeit ein, an dem Ihre Periode begonnen hat. Wenn Ihre Periode in der Nacht eingesetzt hat und Sie nicht die genaue Uhrzeit kennen, geben Sie die Zeit ein, zu der Sie aufgewacht sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wann die Periode begonnen hat, da der Monitor auf Basis dieser Angabe den ersten Tag Ihres Zyklus berechnet.


Der Testzeitraum

Der Testzeitraum ist die 6-stündige Zeitspanne, in der Ihr Monitor Sie auffordert, einen Test durchzuführen.

Persona stellt Ihren Testzeitraum automatisch auf die Uhrzeit zwischen 05:00 und 11:00 Uhr ein. Diese Einstellung können Sie auf dem hier gezeigten Bildschirm ändern. Allerdings müssen Sie Ihren Test mit dem Morgenurin des entsprechenden Tages durchführen, da dieser die höchste Konzentration der Hormone enthält.

Sobald Sie Ihren neuen Anwendungszyklus eingerichtet haben, zeigt der Monitor Ihnen den Tag Ihres Zyklus an und Sie können ablesen, ob es sich um einen "Roten Tag" oder einen "Grünen Tag" handelt.

Wenn Sie innerhalb der ersten 4 Tage Ihres Zyklus keinen neuen Zyklus einrichten, dann verfügt der Monitor über zu wenig Informationen, um Ihnen anzuzeigen, ob es sich um einen „Roten Tag“ oder einen „Grünen Tag“ handelt. Siehe Frage 4.

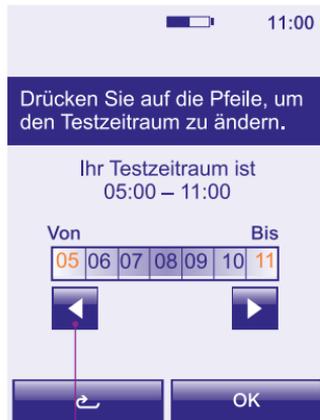

Passen Sie den Testzeitraum unter Verwendung der Pfeiltasten an und drücken Sie „OK“.

Der auf Ihrem Monitor angezeigte Zyklustag hängt von der Uhrzeit ab, an dem Ihre Periode eingesetzt hat und vom eingestellten Endpunkt Ihres Testzeitraums. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Anwendungszyklus eingerichtet haben, kann es passieren, dass der Tag 1 nicht bis zu dem Tag nach dem Einsetzen Ihrer Periode angezeigt wird. Wenn dies passiert, dann sagt Ihnen der Menü-Bildschirm, dass der neue Zyklus noch aussteht.

Zu Beginn eines jeden neuen Zyklus stellt der Monitor den Testzeitraum auf den Zeitraum Ihres vorherigen Zyklus ein. Sie können diese Einstellung ändern. Bedenken Sie bei der Einrichtung des Testzeitraums, dass die gewählte Zeitspanne Ihnen ermöglichen muss, Ihren Test mit dem Morgenurin des entsprechenden Tages durchzuführen.



Einrichtung der Erinnerungsfunktion

Zur Erinnerung an die Testdurchführung können Sie einen Alarm einrichten. Sie können ihn jedoch nur so einstellen, dass er während des 6-stündigen Testzeitraums ertönt. An Testtagen ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit.

Drücken Sie zur Einrichtung des Alarms auf  im Menü und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald Sie den Alarm eingerichtet haben, erscheint oberhalb des Informationsbalkens das Alarmsymbol . (Sie können erst dann einen Alarm einstellen, wenn Sie Ihren Anwendungszyklus eingerichtet haben.)

Der Alarm erlischt, wenn Sie Ihren Monitor einschalten, oder ertönt bis zum Ende Ihres Testzeitraums. Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie zum Hauptmenü gehen, auf  drücken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Wenn Sie zu Beginn eines neuen Zyklus den Testzeitraum ändern und die Alarmeinstellung des vorherigen Zyklus nicht innerhalb des neuen Testzeitraums liegt, dann wird der Alarm automatisch gelöscht. Drücken Sie zur Einrichtung eines neuen Alarms in Ihrem neuen Testzeitraum auf  im Menü und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Einrichtung Ihres Anwendungszyklus verändern oder löschen

Wenn Sie die Einrichtung Ihres Anwendungszyklus ändern oder löschen wollen, dann drücken Sie im Menü auf . Die Veränderung Ihres Anwendungszyklus ermöglicht Ihnen, das Datum und die Uhrzeit, zu dem Ihre Periode einsetzte, zu ändern. Sie können Ihren Anwendungszyklus nur zwischen dem 1. Tag und dem 4. Tag Ihres Zyklus verändern.

Sie können Ihren Anwendungszyklus bis zum 4. Tag löschen. Sie können diese Funktion beispielsweise nutzen, wenn Sie dachten, dass Ihre Periode begonnen hat, es sich aber nur um eine Zwischenblutung gehandelt hat. Wenn Ihre Periode einsetzt, dann stellen Sie Ihren Zyklus wie gewohnt ein.

Grüne Tage, Rote Tage und Testtage

Der Monitor zeigt jeden Tag das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit sowie den Tag Ihres Zyklus an. Schalten Sie innerhalb des Testzeitraums jeden Morgen Ihren Monitor ein, um zu prüfen, ob es sich um einen „Roten Tag“, einen „Grünen Tag“ oder einen Testtag handelt. Wir empfehlen Ihnen, dies auch vor jedem Geschlechtsverkehr zu überprüfen. Wenn es sich um einen Testtag handelt, dann gilt das Ergebnis des durchgeführten Tests.



„**Grüne Tage**“ sind Tage, an denen Sie ohne Verhütung Geschlechtsverkehr haben können.* An „Grünen Tagen“ liefert Ihnen der Bildschirm möglicherweise noch weitere Informationen, wie z.B. das Datum Ihres nächsten Tests.



„**Rote Tage**“ sind die Tage rund um Ihren Eisprung (Ovulation) und solche Tage, an denen das Risiko für eine Schwangerschaft hoch ist, selbst wenn Sie ein Kondom verwenden. An „Roten Tagen“ liefert Ihnen der Bildschirm möglicherweise weitere Informationen, wie z.B. das Datum Ihres nächsten Tests.

Wenn Sie Persona verwenden, dann dürfen Sie an „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben. Siehe Frage 9.

Persona zeigt in jedem Zyklus typischerweise 6 bis 12 „Rote Tage“ an. Während der ersten Zyklen, in denen Ihr Persona Monitor Sie kennenlernt, werden Sie möglicherweise 10 - 15 „Rote Tage“ haben (es können auch bis zu 22 „Rote Tage“ sein).

Zyklen variieren nicht nur von Frau zu Frau, sondern können auch von Zyklus zu Zyklus nicht immer gleich sein. Das bedeutet, dass die Anzahl und der zeitliche Verlauf „Roter Tage“ unterschiedlich sein kann. Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, haben Sie möglicherweise mehr als 12 „Rote Tage“ pro Zyklus. Sie können die Anzahl „Roter Tage“ minimieren, indem Sie alle Tests anleitungsgemäß durchführen.

Wenn während des Zyklus das „O“-Symbol (Ovulation)  angezeigt wird, erscheint es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Am ersten Tag, an dem es angezeigt wird, bedeutet es, dass Sie innerhalb der nächsten 1 bis 2 Tage Ihren Eisprung haben werden. Dies ist die Zeit mit dem höchsten Risiko einer Schwangerschaft. Allerdings sollten Sie an allen „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben.

Wenn der Monitor Sie am Tag, nachdem das „O“-Symbol (Ovulation) zuerst angezeigt wurde, dazu auffordert, einen Test durchzuführen und Sie diesen Test nicht machen, dann zeigt der Bildschirm dies als verpassten Test an.

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn das „O“-Symbol (Ovulation) in einigen Zyklen nicht angezeigt wird. Wenn Sie Persona drei vollständige Zyklen hindurch verwendet haben und das „O“-Symbol (Ovulation) innerhalb dieses Zeitraums noch nicht angezeigt wurde, rufen Sie bitte unseren Beratungsservice an.

An **Testtagen** müssen Sie einen Test durchführen, um zu überprüfen, ob Sie einen „Roten Tag“ oder einen „Grünen Tag“ haben. Während Ihres ersten Anwendungszyklus müssen Sie diese Tests an 16 Tagen durchführen. Der erste Test wird am 6. Tag und die anderen Tests an den Tagen 9 bis 23 angefordert.

Nach Ihrem ersten Zyklus werden Sie aufgefordert, an jeweils 8 Tagen eines Zyklus einen Test durchzuführen. **Sie werden stets dazu aufgefordert, Ihren ersten Test an Tag 6 durchzuführen.** Ihr Monitor fordert Sie danach auf, die weiteren Tests an 7 aufeinander folgenden Tagen durchzuführen. Der Beginn der 7 Testtage kann von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein.

Es ist wichtig, dass Sie alle Tests anleitungsgemäß durchführen. Wenn Sie einen Test verpassen, dann wird der Monitor anhand der verfügbaren Daten entscheiden, ob es sich um einen „Roten Tag“ oder einen „Grünen Tag“ handelt. Das kann dazu führen, dass Sie mehr „Rote Tage“ in Ihrem Zyklus haben.



Zeigt den Tag Ihres aktuellen Zyklus an

Informationsbereich

Durchführung des Tests

Während Ihres Testzeitraums müssen Sie Ihren Monitor täglich abfragen. Sie müssen den Test mit Morgenurin (erster Urin nach dem Aufwachen) durchführen. Sie müssen also Ihren Monitor abfragen, bevor Sie auf Toilette gehen. An einem Testtag blinkt das Testlicht. Sollten Sie die Alarmfunktion aktiviert haben, dann erklingt an einem Testtag der Alarmton.

Wenn Sie auf dem Bildschirm des Testtages OK drücken, kehren Sie zum Menü zurück. An einem Testtag können Sie unabhängig vom angezeigten Bildschirm zu jeder Zeit innerhalb des Testzeitraums ein Teststäbchen in den Monitor einsetzen. Ob ein Testtag ist, wird oben neben dem Tag Ihres aktuellen Zyklus angezeigt.

Verwenden Sie für den Monitor nur Persona Teststäbchen. Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Teststäbchen, die Sie im Zeitraum eines Zyklus verwenden, die gleiche Chargennummer haben. Die Chargennummer finden Sie unter der Bezeichnung LOT auf der Folienverpackung des Teststäbchens und auf dem Karton, der die Teststäbchen enthält. Verwenden Sie keine Teststäbchen, deren Verfalldatum abgelaufen oder deren Folienverpackung beschädigt ist.

Sollten Sie Ihren Urin für einen späteren Test aufbewahren wollen, z.B. wenn Sie zur Toilette gehen müssen, bevor Ihr Testzeitraum beginnt, dann verwenden Sie hierfür einen sauberen und trockenen Behälter und bewahren Sie diesen bis zur Durchführung des Tests bei Raumtemperatur auf. Denken Sie daran, den Test während des Testzeitraums durchzuführen.

So führen Sie einen Test durch

1. Wenn Sie bereit sind, einen Test durchzuführen, dann entnehmen Sie ein Teststäbchen aus seiner Folienverpackung und verwenden Sie es umgehend.




2. Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Testspitze nach unten weisend für **3 Sekunden** (nicht länger) in Ihren Urinstrahl. **Alternativ** können Sie den Urin in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und die saugfähige Testspitze, wie gezeigt, für **15 Sekunden** (nicht länger) in den Urin eintauchen.



3. Halten Sie das Teststäbchen weiterhin mit der saugfähigen Testspitze nach unten, **nehmen Sie die Kappe vom Griff ab und setzen Sie diese auf die saugfähige Testspitze auf.** Wischen Sie überschüssigen Urin vom Teststäbchen ab.

Setzen Sie die Kappe auf die saugfähige Testspitze auf, bevor Sie das Teststäbchen in den Monitor einsetzen.

3.

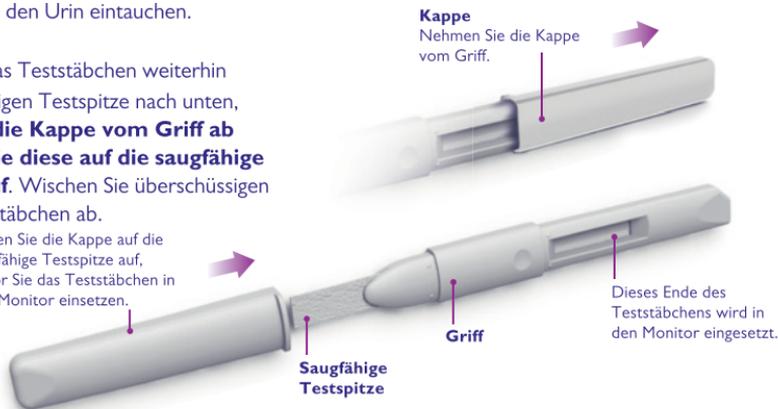



4. Sollte der Monitor ausgeschaltet sein, dann müssen Sie **ihn jetzt einschalten** und auf den Bildschirm für den Testtag warten, bevor Sie das Teststäbchen einsetzen. Stecken Sie das Teststäbchen, wie gezeigt, möglichst zügig in den Einschubschlitz des Monitors ein und stellen Sie diesen auf eine flache Oberfläche.

Warten Sie 5 Minuten. Der Bildschirm schaltet sich nach einer Minute aus (das ist normal). Der Monitor liest aber weiterhin den Test. Während der Testphase blinkt das Testlicht.

5. Sobald der Test fertig ist, ertönt ein Signal. Wenn der Monitor aus ist, dann schalten Sie ihn wieder ein. Der Bildschirm fordert Sie dazu auf, das Teststäbchen aus dem Monitor zu entnehmen. Entsorgen Sie das Teststäbchen in Ihrem normalen Haushaltsmüll. Verwenden Sie jedes Teststäbchen nur einmal.

6. Sobald Sie das Teststäbchen aus dem Monitor entnommen haben, zeigt der Bildschirm an, ob es sich um einen „Grünen Tag“ oder einen „Roten Tag“ handelt.

Während der Tests darf die saugfähige Testspitze des Teststäbchens **nicht** nach oben zeigen, da dies das Ergebnis beeinflussen kann.

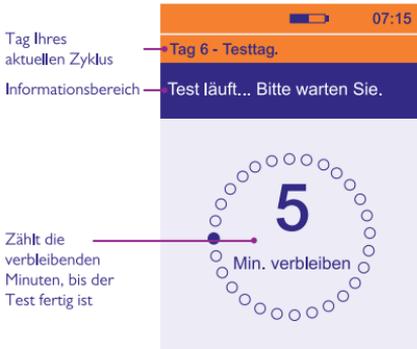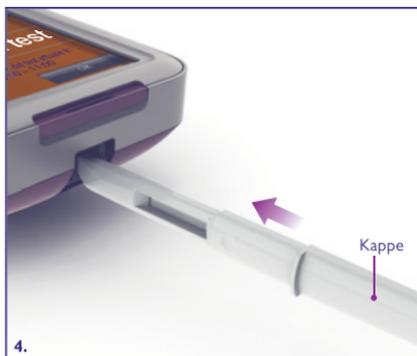

Kalender

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel, wie Ihr Kalender aussehen kann.



Beginn eines neuen Anwendungszyklus (Tag 1).

3

Grüner Tag.

14

Roter Tag.



„O“-Symbol (Ovulation).

23

„Rote Tage“ des vorherigen Zyklus.

30

„Grüne Tage“ des vorherigen Zyklus.

27

Das heutige Datum (angezeigt durch einen schwarzen Rahmen).



Gehen Sie mit Hilfe des Pfeils zurück zu Ihren vergangenen Zyklen.

Wenn Sie einen Test verpassen, dann erscheint an dem Tag . Je nach Art des Tages wird der Hintergrund entweder rot oder grün sein.

Zu Beginn eines neuen Zyklus sind die Tage, an denen Sie einen Test durchführen müssen, orange hinterlegt. Während des ersten Zyklus, in dem Sie Persona verwenden, werden 16 Testtage angezeigt. Ab Ihrem zweiten Zyklus werden dann 8 Testtage angezeigt (siehe Beispiel unten).

Der erste Test eines jeden Zyklus ist stets an Tag 6 durchzuführen.

M	D	M	D	F	S	S
23	24	25	26	27		29
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

Sobald der Test durchgeführt wurde, wird entweder ein „Roter Tag“ oder ein „Grüner Tag“ angezeigt. Wenn Sie einen Test verpassen, dann zeigt der Monitor anstelle des Testtages auf rotem oder grünem Hintergrund das Symbol für einen verpassten Test an.


Ihr Monitor speichert die Informationen Ihres aktuellen Zyklus sowie die der vorherigen 6 Zyklen. Sie können diese Informationen abrufen, indem Sie auf dem Bildschirm auf  oder auf  drücken.

Tipps und Problemlösungen

Der Bildschirm bietet Ihnen Hilfestellungen, sollte es zu Problemen kommen oder der Monitor noch Informationen benötigen.

Mögliche Meldung: „Entnehmen Sie das Teststäbchen 1“.

Entnehmen Sie das
Teststäbchen aus dem
Monitor

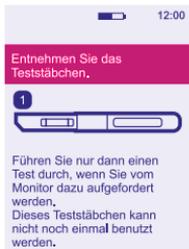

Mögliche Meldung: „Entnehmen Sie das Teststäbchen 2“.

Erst wenn Sie das
Teststäbchen aus dem
Einschubschlitz des
Monitors entnommen
haben, zeigt dieser Ihnen
an, ob es sich um einen
„Roten Tag“ oder einen
„Grünen Tag“ handelt.



Mögliche Meldung: „Unvollständiger Test 3“.

Das Teststäbchen
wurde bereits vor dem
Ende des Auslesens des
Tests entnommen. Der
Monitor bewertet dies
als einen verpassten
Test.



Der Nachrichtenbereich wird rot hervorgehoben.

Der Nachrichtenbereich
wird rot hinterlegt, wenn
Sie falsche Informationen
eingegeben oder Sie die
OK-Taste drücken, ohne
zuvor Informationen
eingegeben zu haben.
Überprüfen Sie Ihre
Eingabe und geben Sie die
korrekten Informationen
ein.



Mögliche Meldung: „Die Batterien sind schwach“.

Die Batterien sind fast leer und sollten gegen neue ausgetauscht werden. Ersetzen Sie die Batterien **nicht** während Ihrem Testzeitraum. Schalten Sie nach Ende des Testzeitraums und vor dem Batteriewechsel den Monitor aus. Entnehmen Sie die alten Batterien erst, wenn Sie neue Batterien parat haben. Sobald Sie die neuen Batterien eingesetzt haben, müssen Sie den Monitor zum Durchlaufen von Selbsttests wieder einschalten. Siehe Fragen 14 und 15.

Mögliche Meldung: „Schlagen Sie bitte in der Gebrauchsanlei- tung nach“.

Diese Meldung zeigt ein Problem mit dem Monitor an. Zudem erscheint auf dem Bildschirm eine Zahl. Bitte rufen Sie unseren Beratungsservice an. Teilen Sie mit, dass Sie ein Problem mit Ihrem Monitor haben und welche Zahl auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.



Mögliche Meldung: „Setzen Sie neue Batterien ein“.

Sie können weitere Tests erst durchführen, wenn Sie die Batterien durch neue ersetzt haben. Zum Schutz gespeicherter Informationen schaltet der Monitor sich selbstständig aus. Entnehmen Sie die leeren Batterien erst, wenn Sie neue Batterien parat haben. Sobald Sie die neuen Batterien eingesetzt haben, müssen Sie den Monitor zum Durchlaufen von Selbsttests wieder einschalten.

Mögliche Meldung: „Schalten Sie den Monitor aus, und reinigen Sie den Einschubschlitz für die Teststäbchen“.

Vor dem Einsetzen eines neuen Teststäbchens müssen Sie den Einschubschlitz des Monitors reinigen.



Reinigung des Einschubslitzes für die Teststäbchen

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab und die Führungsschiene für das Teststäbchen heraus.
2. Befeuchten Sie vorsichtig ein sauberes Wattestäbchen mit kaltem Wasser und reinigen Sie sorgfältig den Einschubbereich und die Führungsschiene für das Teststäbchen.
3. Setzen Sie die Führungsschiene für das **Teststäbchen** und anschließend die Batterieabdeckung wieder ein.



Aufbewahrung Ihres Monitors

Bewahren Sie Ihren Monitor an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf.

Neuprogrammierung Ihres Monitors

Eine Neuprogrammierung Ihres Monitors löscht alle im Gerät gespeicherten Informationen. Sobald die Informationen gelöscht wurden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Unter bestimmten Umständen kann eine Neuprogrammierung Ihres Monitors erforderlich werden (zum Beispiel wenn Sie vergessen haben, einen neuen Zyklus einzurichten).

Nach einer Neuprogrammierung verhält der Monitor sich so, als ob Sie ihn zum ersten Mal verwenden und behandelt Sie dementsprechend als eine neue Anwenderin. Sie müssen Ihren Monitor ganz neu einstellen und während des ersten Zyklus erneut 16 Tests durchführen. Sie haben möglicherweise während der ersten Zyklen auch wieder mehr „Rote Tage“.

Klicken Sie zur Neuprogrammierung Ihres Monitors im Einrichtungsmenü auf **1** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Uhrzeit einstellen – Sommer-/Winterzeit

Drücken Sie im Einrichtungsmenü auf **U**, um Ihren Monitor auf Sommer-/Winterzeit umzustellen. Möglicherweise müssen Sie die Uhrzeit nur um eine Stunde vor- oder zurückstellen. Ihr Testzeitraum wird automatisch aktualisiert. Sie können die Uhrzeit lediglich bis zum 4. Tag Ihres Zyklus neu einstellen. Wenn Sie in Ihrem Zyklus weiter als Tag 4 sind, dann können Sie die Uhrzeit erst wieder zu Beginn Ihres nächsten Zyklus neu einstellen.

Der Monitor ist so programmiert, dass Sie die Uhrzeit nur zweimal im Jahr (Umstellung Winter-/Sommerzeit) verändern können. Sollten Sie sich im Zuge einer Reise in einer anderen Zeitzone aufhalten, können Sie die Zeit an Ihrem Monitor nicht umstellen.

Wenn Sie die Zeit um mehr als eine Stunde vor- oder zurückstellen wollen, dann müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren, was wiederum zur Folge hat, dass alle gespeicherten Informationen verloren gehen. Siehe oben.

Fragen und Antworten

1. Kann ich Persona verwenden, wenn ich Medikamente einnehme oder unter einer Erkrankung leide?

Sie dürfen Persona nicht verwenden, wenn:

- Sie eine Hormonbehandlung erhalten (zum Beispiel Antibabypille, Notfall-Verhütung, Fertilitätsbehandlung oder Hormonersatztherapie);
- Sie Wechseljahressymptome hatten, wie zum Beispiel nächtliches Schwitzen oder Hitzewallungen;
- Sie sich einer Behandlung unterziehen, die Ihren Zyklus beeinflussen kann;
- Sie Antibiotika einnehmen, die Tetracyclin enthalten. Sobald Sie Ihre Behandlung beendet haben, können Sie zu Beginn Ihres nächsten Zyklus mit der Anwendung von Persona beginnen;
- Ihre Leber- oder Nierenfunktion beeinträchtigt ist;
- Sie unter dem polyzystischen Ovarialsyndrom leiden.

Wenn Sie Medikamente einnehmen, dann sollten Sie grundsätzlich den Beipackzettel aufmerksam lesen und kontrollieren, ob sich die Einnahme des Medikaments auf Ihren Zyklus auswirken kann. Sollte der Beipackzettel hierzu nur unzureichende Informationen enthalten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Medikaments. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt „Ist Persona für mich geeignet?“ auf Seite 3.

2. Was passiert, wenn ich während eines Anwendungszyklus krank werde?

Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie Ihren Monitor weiterhin verwenden und die Tests wie erforderlich durchführen. Wenn Sie die Tests nicht durchführen können, dann trifft der Monitor auf Basis der vorhandenen Informationen eine Entscheidung. Das kann bedeuten, dass Sie in dem laufenden Zyklus und auch in den nächsten Zyklen mehr „Rote Tage“ haben.

3. Was ist, wenn meine Zykluslänge von Monat zu Monat unterschiedlich ist?

Solange Ihr Zyklus mindestens 23 Tage und höchstens 35 Tage dauert, spielen Variationen in der Länge keine Rolle.

Wenn Ihr Zyklus kürzer als 23 Tage oder länger als 35 Tage ist, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an unseren Beratungsservice.

4. Ich habe vergessen, an dem Tag, an dem meine Periode eingesetzt hat, einen neuen Anwendungszyklus einzustellen. Was soll ich machen?

In den ersten 4 Tagen Ihres neuen Anwendungszyklus können Sie einen neuen Zyklus einstellen. Drücken Sie hierzu im Menü auf . (Auf Seite 7 finden Sie Informationen zur Einstellung eines neuen Zyklus.) **Wenn Sie Ihren neuen Zyklus nicht bis Tag 4 eingestellt haben**, dann müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren (siehe Seite 18). Sie können dann erst wieder zu Beginn Ihres nächsten Zyklus einen neuen Anwendungszyklus einstellen (siehe Seite 7). Bis zur Einrichtung eines neuen Zyklus sollten Sie sich zur Verhütung nicht auf Persona verlassen.

5. Ich dachte, dass meine Periode angefangen hat und habe einen neuen Anwendungszyklus eingestellt. Tatsächlich handelte es sich aber nur um eine Zwischenblutung oder Schmierblutung. Was soll ich machen?

Drücken Sie im Menü auf  und befolgen Sie die Anweisungen zur Löschung Ihres Anwendungszyklus. Sie können Ihren Zyklus nur zwischen Tag 1 und Tag 4 Ihres Zyklus löschen. Stellen Sie dann mit Beginn Ihrer Periode den neuen Anwendungszyklus ein.

6. Was passiert, wenn ich meinen Zyklus nach Tag 4 löschen muss?

Wenn Sie Ihren Anwendungszyklus nach Tag 4 löschen müssen, müssen Sie anschließend Ihren Monitor neu programmieren (siehe Seite 18). Sie können dann gegebenenfalls mit dem Einsetzen Ihrer nächsten Periode einen neuen Zyklus einrichten (siehe Seite 7). Bis zur Einrichtung eines neuen Anwendungszyklus sollten Sie sich zur Verhütung nicht auf Persona verlassen.

7. Was soll ich tun, wenn ich dringend auf Toilette muss bevor mein Testzeitraum beginnt?

Sie sollten stets den Urin verwenden, den Sie nach der längsten Schlafperiode ausscheiden (in der Regel der Morgenurin). Das kann bedeuteten, dass Sie eine Urinprobe sammeln müssen, um diese dann später zum Testen zu verwenden (siehe Seite 11).

8. Ich habe meine PIN vergessen. Was soll ich machen?

Sie haben zwei Versuche, die PIN korrekt einzugeben. Wenn Sie Ihre PIN zweimal falsch eingeben, dann wird der Monitor automatisch gesperrt und ausgeschaltet. Sie können Ihren Monitor entsperren, indem Sie ihn wieder einschalten und als PIN die Zahlenfolge „0000“ eingeben. Anschließend müssen Sie die PIN ändern. Folgen Sie hierfür den Anweisungen auf dem Bildschirm.

9. Darf ich an „Roten Tagen“ wirklich keinen Geschlechtsverkehr haben?

Damit Persona Sie mit einer Zuverlässigkeit von 94% vor einer Schwangerschaft schützt, dürfen Sie an „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben. Wenn Sie sich an einem „Roten Tag“ entscheiden, unter Verwendung einer alternativen Methode Geschlechtsverkehr zu haben, dann hängt die Zuverlässigkeit von der gewählten Methode der Empfängnisverhütung ab und nicht von Persona.

10. Ich habe meinen Monitor einige Zeit lang nicht verwendet. Was soll ich machen?

Wenn Sie Ihren Monitor mehr als einen Zyklus lang nicht verwendet haben, dann müssen Sie diesen neu programmieren. (Siehe Seite 18)

Zudem sollten Sie überprüfen, ob die Anwendung von Persona weiterhin für Sie geeignet ist (siehe Seite 3).

11. Kann ich während meines Testzeitraums Geschlechtsverkehr haben, ohne vorher den Monitor befragen zu müssen?

Wir empfehlen Ihnen, vor jedem Geschlechtsverkehr mit einem Blick auf den Monitor zu überprüfen, ob ein „Roter Tag“, ein „Grüner Tag“ oder ein Testtag vorliegt. Wenn es sich um einen Testtag handelt, dann gilt das Ergebnis des durchgeführten Tests.

12. Was passiert, wenn ich mal später aufstehe oder veresse, den Test während des Testzeitraums durchzuführen?

Wenn Sie Ihren Test nicht während des Testzeitraums durchführen, zeigt der Monitor an, dass Sie einen Test verpasst haben. Für seine Entscheidung über den Tag (Rot oder Grün) verwendet der Monitor die gespeicherten Informationen.

Wenn Sie mehrere Tests verpassen, dann haben Sie möglicherweise während des aktuellen Zyklus oder in den nächsten Zyklen mehr „Rote Tage“. Es ist also wichtig, dass Sie die Tests durchführen wie sie vom Monitor angefordert werden.

13. Ist mein Monitor wasserdicht?

Der Monitor ist nicht wasserdicht. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass er nicht nass wird. Wischen Sie vor dem Einsetzen des Teststäbchens in den Einschubschlitz des Monitors stets den überschüssigen Urin ab.

14. Kann ich die in meinem Monitor gespeicherten Informationen verlieren?

Wenn die Batterien in Ihrem Monitor fast leer sind, dann schaltet sich der Monitor zum Schutz der gespeicherten Daten selbstständig aus. Sie müssen erst die alten Batterien gegen neue austauschen, bevor Sie wieder einen Test durchführen können.

Der Monitor benötigt eine kontinuierliche Batteriestromversorgung. Es ist daher wichtig, dass Sie die Batterien austauschen, wenn Sie vom Monitor dazu aufgefordert werden. Wenn die Versorgung mit Batteriestrom für längere Zeit unterbrochen ist, dann programmiert sich der Monitor automatisch neu und löscht dabei alle gespeicherten Informationen zu Ihren Zyklen. Wenn dies passiert, dann fordert der Monitor Sie beim nächsten Einschalten auf, die gewünschte Sprache für den Monitor auszuwählen. Sie müssen im Anschluss daran den Monitor neu einstellen und dann mit dem Einsetzen Ihrer Periode auch einen neuen Anwendungszyklus eingeben (siehe Seite 7). Bis Sie einen neuen Zyklus eingestellt haben, sollten Sie sich im Rahmen der Verhütung nicht auf Persona verlassen.

15. Was passiert, wenn ich während des Testzeitraums die Batterien austausche?

Während des Testzeitraums benötigt der Monitor mehr Batteriestrom, selbst wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn Sie daher während des Testzeitraums die Batterien entnehmen, steht dem Monitor nicht genügend Batteriestrom zur Verfügung und er programmiert sich nach dem Einsetzen der neuen Batterien automatisch neu. Wenn dies passiert, dann fordert der Monitor Sie beim nächsten Einschalten auf, die gewünschte Sprache für den Monitor auszuwählen (siehe Frage 14).

16. Was soll ich tun, wenn ich auf Reisen bin und sich die Zeitzone ändert?

Wenn Sie reisen, sollten Sie Ihren Monitor stets im Handgepäck bei sich tragen. Der Monitor übersteht die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen ohne Probleme.

Sie können die Uhrzeit Ihres Monitors nur zweimal im Jahr um eine Stunde im Rahmen der Umstellung von Winter-/Sommerzeit ändern. Siehe Seite 18,

Auch wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen, müssen Sie den Test weiterhin innerhalb des eingestellten Testzeitraums durchführen. Das kann bedeuten, dass Sie Ihren Morgenurin in einem Behälter sammeln müssen, um ihn dann später während Ihres Testzeitraums zu verwenden. Der Monitor erinnert Sie an den Zeitpunkt zur Durchführung des Tests. Dabei hilft die Einrichtung der Alarmfunktion.

17. Was passiert, wenn ich im Schichtdienst arbeite?

Wenn Sie Ihren neuen Anwendungszyklus einstellen, stellen Sie Ihren Testzeitraum so ein, dass Sie mit dem ersten Urin nach dem Aufwachen testen können. Wenn Sie in Nachtschichten arbeiten und morgens schlafen gehen, bietet sich ein Testen des Urins nach dem Aufwachen am Nachmittag an. Wenn sich Ihre Schicht während Ihres Zyklus ändert, dann können Sie auch weiterhin den Test nur während Ihres Testzeitraums durchführen. Hierfür sollten Sie aber stets nur den Urin nach dem Aufwachen verwenden. Dies kann bedeuten, dass Sie den Urin in einem Behälter zum späteren Testen im Testzeitraum sammeln müssen.

18. Was soll ich machen, wenn mein Monitor nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert?

Sollte Ihr Monitor nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, rufen Sie bitte bei unserem Beratungsservice an.

19. Ich habe den Eindruck, dass der Bildschirm nicht mehr funktioniert. Die Schaltflächen reagieren nicht mehr. Was soll ich machen?

Möglicherweise müssen Sie den Bildschirm, der die Positionierung der Schaltflächen bei Berührung steuert, erneut kalibrieren. Drücken Sie unter Einstellungen auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

20. Was passiert, wenn ich Persona nicht mehr verwenden möchte?

Sie können die Verwendung von Persona einen Zyklus lang unterbrechen, sollten jedoch einen neuen Anwendungszyklus einrichten. Dann können Sie die Aufforderungen des Monitors zum Testen für diesen Zyklus ignorieren. Während dieses Zyklus dürfen Sie sich im Rahmen der Verhütung nicht auf Persona verlassen.

Wenn Sie anschließend Persona wieder regelmäßig verwenden, haben Sie möglicherweise mehr „Rote Tage“.

Wenn Sie für mehr als einen Zyklus aufhören wollen Persona zu verwenden, dann entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie diese zusammen mit dem Monitor an einem trockenen Platz auf. Wenn Sie Persona zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden möchten, müssen Sie zuerst überprüfen, ob Persona weiterhin für Sie geeignet ist. Danach müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren.

21. Kann ich meinen Monitor ausleihen?

Nein. Der Monitor passt sich an Ihren Zyklus an und speichert alle Ihre individuellen Informationen. Er sollte nicht von einer anderen Frau benutzt werden. Außerdem sollten Sie Ihren Monitor auch aus hygienischen Gründen nicht mit jemand anderem teilen.

* Persona ist 94% zuverlässig, wenn es anleitungsgemäß und als einzige Verhütungsmethode angewendet wird. Das bedeutet, dass wenn 100 Frauen, die ein Jahr lang Persona anwenden, 6 schwanger werden können, da sie an einem Tag Geschlechtsverkehr hatten, an dem Persona fälschlicherweise angezeigt hat, dass kein Risiko für eine Schwangerschaft besteht („Grüner Tag“).

www.persona.info

Beratungsservice

Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 08005 894 015* • AT 0820 001 148** • CH 0844 000 018**

*Anrufe sind kostenlos. **Telefongebühren variieren; bitte mit Ihrem Telefonanbieter

prüfen. Bitte halten Sie die Chargennummer  bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.

Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Persona ist eine eingetragene Marke.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Der Monitor enthält Magnete.

Dieser Monitor für die In-vitro-Diagnostik entspricht in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität der Europäischen Richtlinie 2004/108/EG. Dieser Monitor wurde gemäß den Anforderungen EN 61326-1 auf Störstrahlungen, Gruppe 1, Klasse B, für Haushaltsgeräte und EN 61326-2-6 auf Störanfälligkeit bei elektrostatischer Entladung und Funkfrequenzen gemäß dem Leistungskriterium A getestet.

Dieser Monitor darf nicht in der Nähe von Quellen mit starker elektromagnetischer Strahlung verwendet werden, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, da diese die Funktionsfähigkeit des Monitors einschränken können.

Zur Vermeidung einer elektrostatischen Entladung sollten Sie den Monitor nicht in einem sehr trockenen Umfeld verwenden, insbesondere nicht dort, wo es viele synthetische Materialien gibt.

